

Monteringsvejledning (DK)

Montering af rygsider (ekstra rygbredde) på x:panda str. 4

Monteringsveiledning (N)

Montering av rygsider (ekstra rygbredde) på x:panda 4

Asennusohje (FIN)

Selkänojan sivulisäkappaleiden asentaminen (selkänojan leventämiseksi)

Mounting instruction (GB)

Mounting extra back sides (to extend back width) x:panda 4

Montageanleitung (D)

Montage von zusätzlichen Rückenseiten (zur Vergrößerung der Rückenbreite) x:panda gröÙe 4

Montage handleiding (NL)

Rugleuning verbredingsset + 5 cm, x:panda maat 4

取付方法 (JP)

背もたれ拡張部取付方法（背もたれの幅を拡張することができます）

Monteringsvejledning

Montering af rygsider (ekstra rygbredde)

R82[®]


KUN TIL STR. 4

Følg nedenstående beskrivelse for at montere ekstra rygsider på x:panda:

- * Rygsiden (A) placeres i hullerne i stoleryggen
- * Skruerne (B) spændes vha. stolens 5 mm unbraconøgle



Sørg for at rygsiden er skubbet helt i bund inden fastspænding.

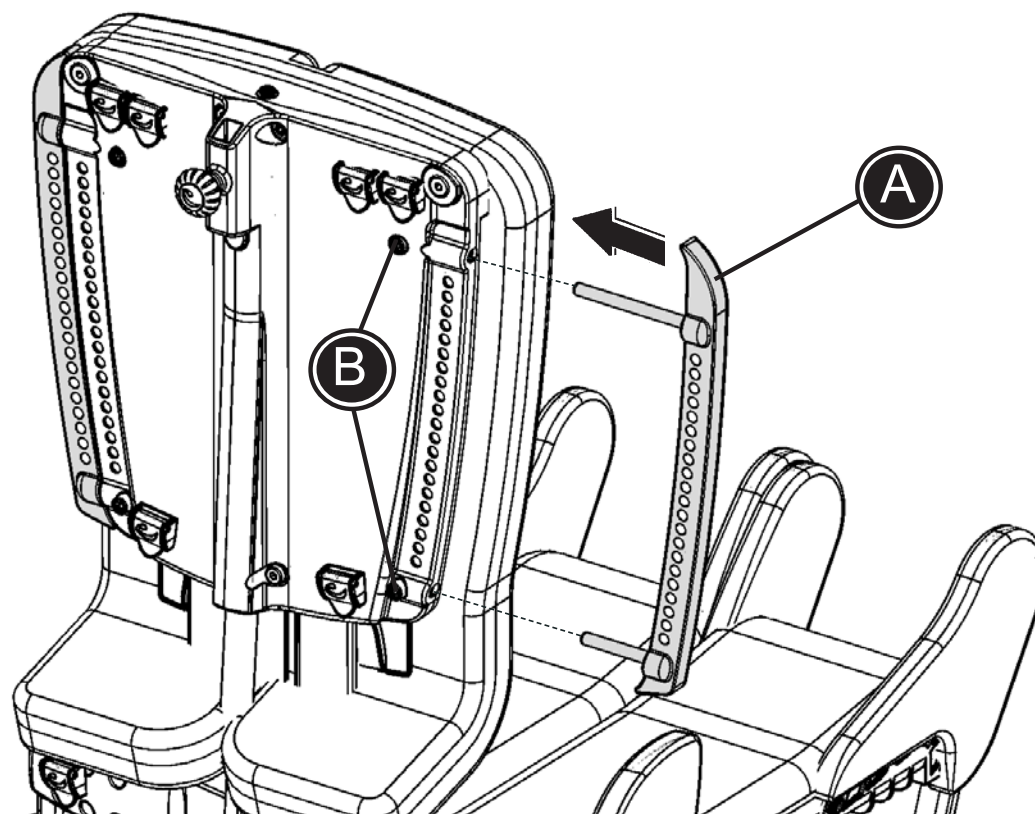

Monteringsveiledning

R82[®]

Montering av ryggsider (ekstra ryggbredde) på x:panda


KUN TIL STR.4

Gjør følgende for å montere ekstra ryggsider:

- Ryggsiden (A) plasseres i hullene i stolryggen
- Skruene (B) strammes med stolens 5 m.m. umbraconøkkel



Påse at ryggsiden er skjøvet helt inn før den skrues fast.

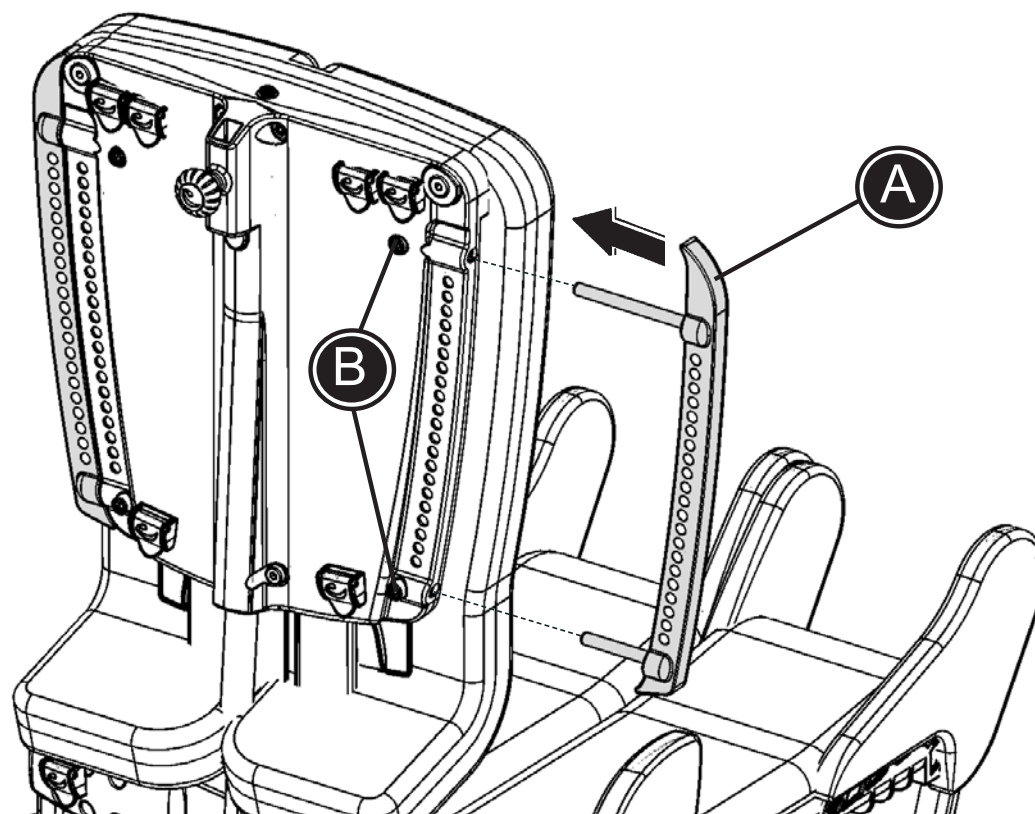

Asennusohje

R82[®]

Selkänojan sivulisäkappaleiden asentaminen (selkänojan leventämiseksi)


KOSKEE VAIN KOKOA 4 olevaa x:pandaa

Noudata alla olevia ohjeita sivulisäkappaleiden kiinnittämiseksi selkänojan leventämiseksi:

- * Aseta sivulisäkappale (A) selkänojassa oleviin kannattimiin
- * Kiristä ruuvit (B) 5 mm:n kuusiokoloavaimella



Varmista, että lisäkappaleet on työnnetty kokonaan sisään ennen ruuvien kiristämistä.

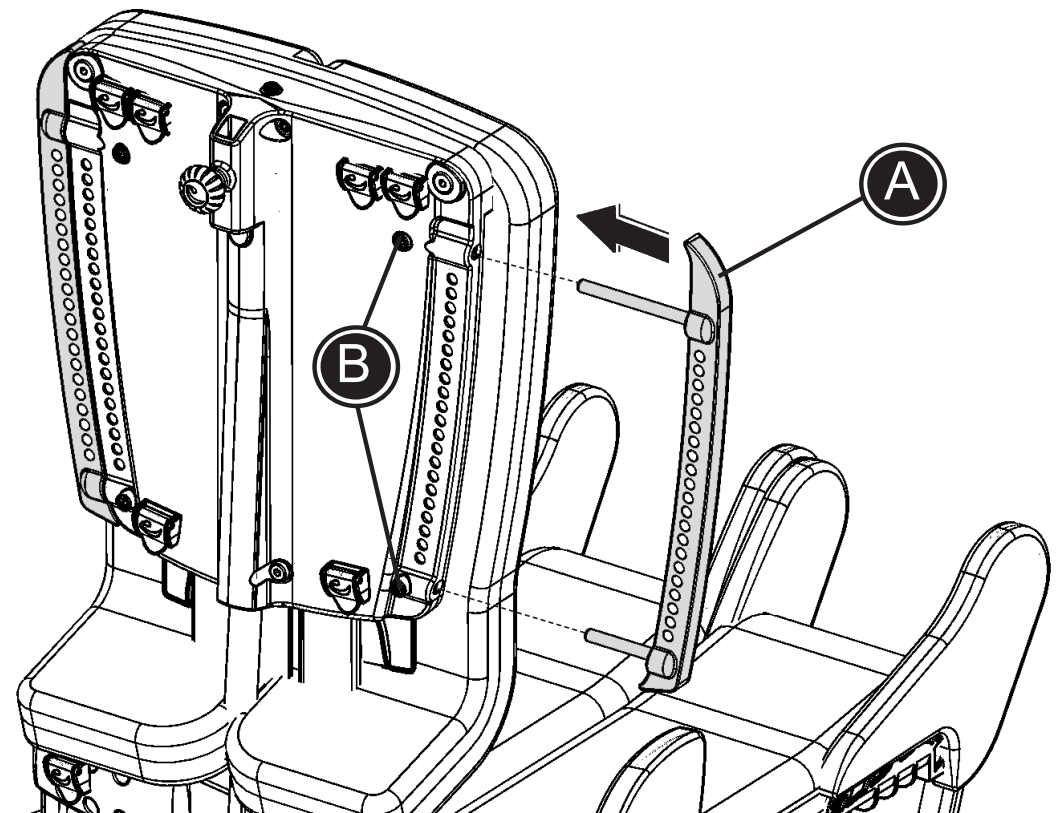

Mounting instruction

R82[®]

Mounting extra back sides (to extend back width)


ONLY FOR SIZE 4 x:panda

Follow the instructions below to mount extra back sides to extend the back width:

- * Place the extra back side (A) in the fittings on the back
- * Fasten the screws (B) with the 5 mm Allan key



Make sure to push the extra back sides all the way in, before fastening the screws.

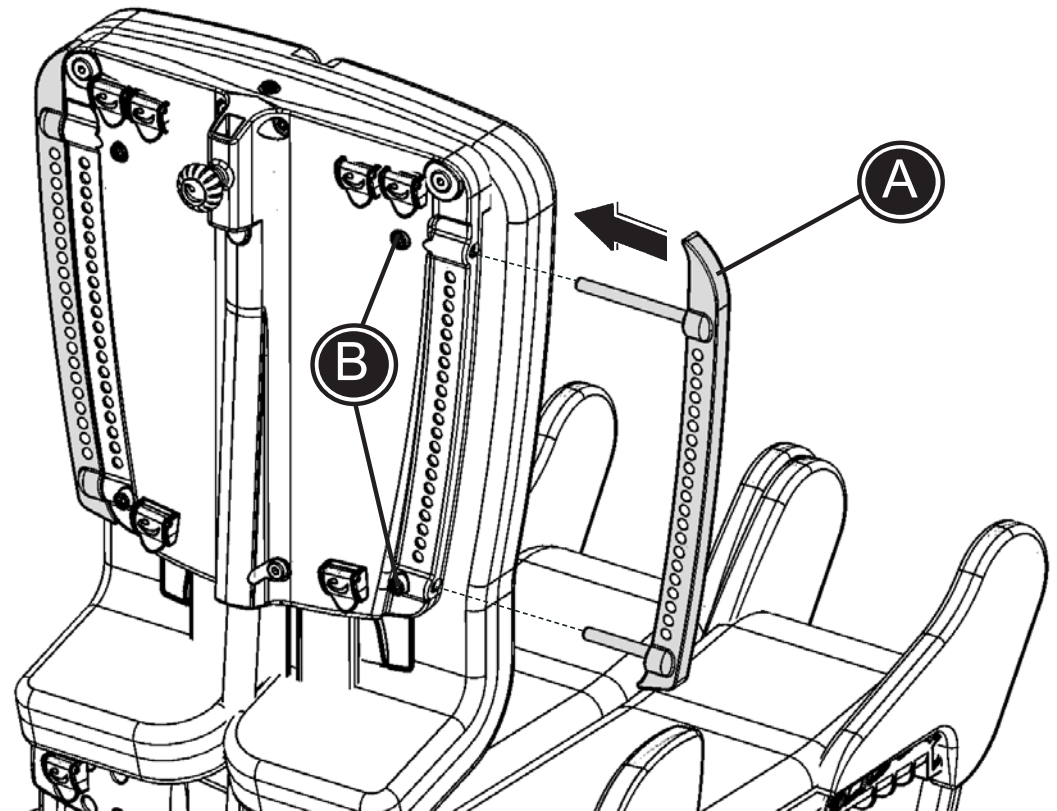

Montageanleitung

R82[®]

Montage von zusätzlichen Rückenseiten (zur Vergrößerung der Rückenbreite)


NUR FÜR GRÖÖE 4 x:panda

Folgen Sie der unten angegebenen Anleitung, um zusätzliche Rückenseiten zu montieren, um die Rückenbreite zu vergrößern:

- * Bringen Sie die zusätzliche Rückenseite (A) in die Beschläge auf dem Rücken
- * Ziehen Sie die Schrauben (B) mit dem beigefügten Inbusschlüssel 6 mm an



Vergewissern Sie sich, die zusätzlichen Rückenseiten vor Anziehen der Schrauben ganz einzudrücken.

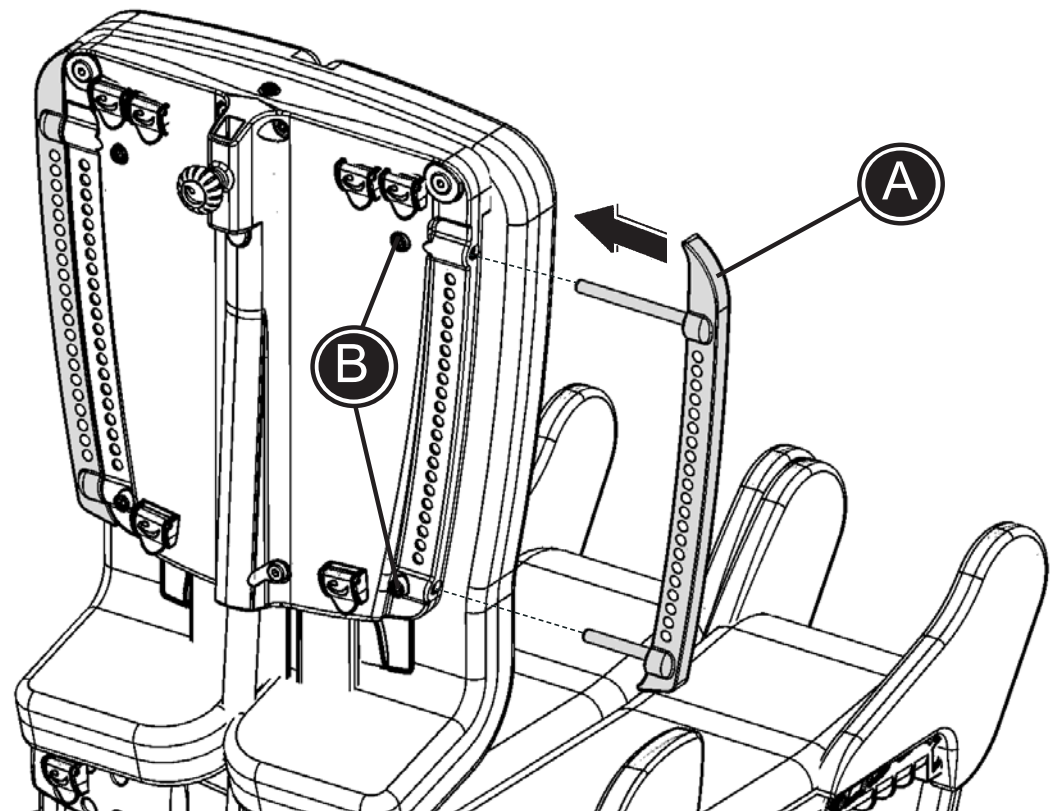

Montage handleiding

Rugleuning verbredingsset +5 cm

R82[®]


UITSLUITEND VOOR x:panda maat 4

Volg onderstaande aanwijzingen voor het monteren van de rugleuning verbredingsset:

- * Plaats het extra rugdeel (A) in de bevestigingen aan de rugleuning
- * Draai de inbusbouten (B) vast met een 5mm inbussleutel



Duw de extra rugdelen helemaal naar binnen voordat u de inbusbouten vastdraait.

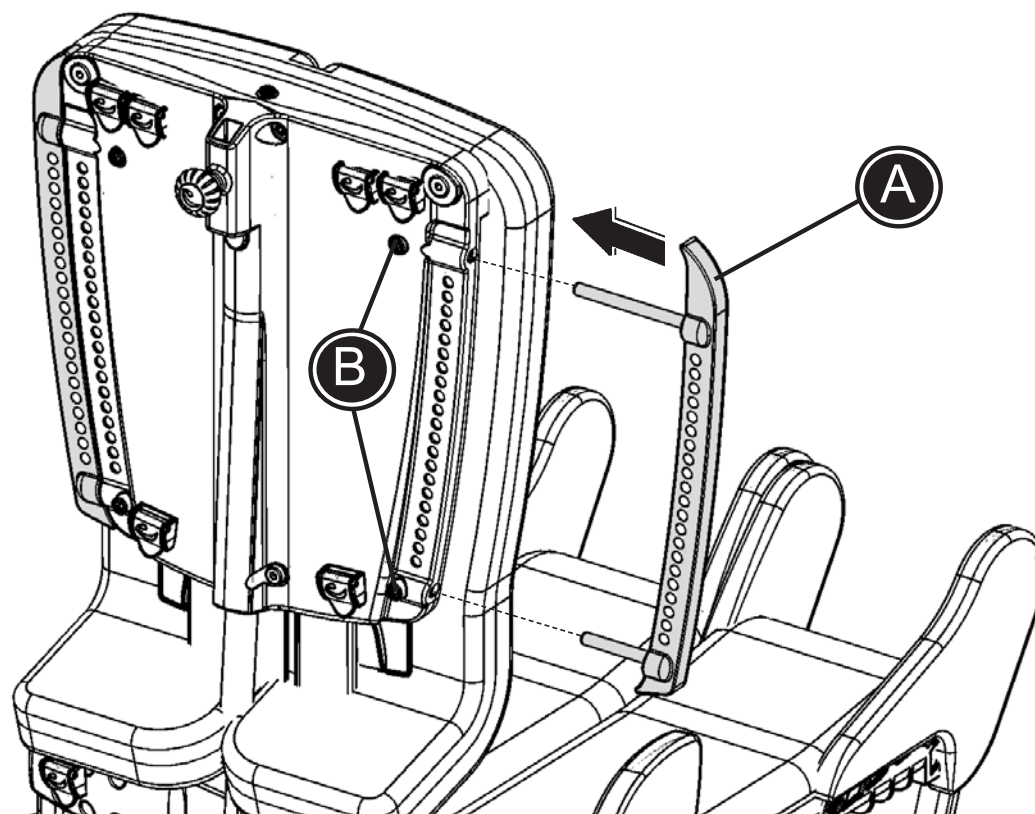

取付方法

R82[®]

背もたれ拡張部取付方法（背もたれの幅を拡張することができます）

シートサイズ4のみご使用いただけます。

以下の手順に従って背もたれ拡張部を取付けてください。

背もたれの差込部に拡張部（A）を取付けてください。

5mmレンチを使って固定ネジ（B）をしっかり締めてください。



ネジを締める前に、背もたれ拡張部が奥までしっかり差し込めているか確認してください。

