

RB2®

*— nothing
compares!*

Monteringsvejledning

Montering af kombi kaleche

Mounting instruction

Mounting of the Combi folding Top

Montageanleitung

Montage des Schutzdaches

Monteringsvejledning

Montering af Kombi kaleche

R82[®]

nothing compares!

Billed nr. 1



Billed nr. 2



Billed nr. 3



Billed nr. 4



Billed nr. 5




Billed nr. 7



Billed nr. 6



Billed nr. 8

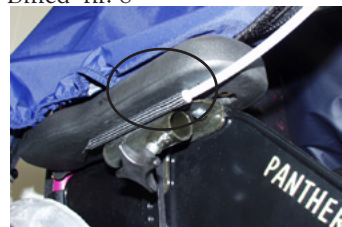

Billed nr. 9



- A) Afmonter armlænene, derefter monteres monteringsset til armene, skru armlænene på igen.
Se billed 1 og 2
- B) Monter beslag på nakkestøtten, rørene på beslaget skal være lodret når nakkestøtten er på stolen igen.
Se billed 3 og 4

Montering på stol:

- D) Monter kalechen på nakkestøtten først. Hvis der er skubbebjøle er lynlåsen delbar
Se billed 5
- E) De vedlagte plastrør monteres i løbegangene, derefter i røret i toppen af kalechen og i armlænene
Se billed 6, 7 og 8

Til sidst lynes forstykket på fra toppen

NB: Kan kun monteres hvis der er nakkestøtte på stolen



Monteringsvejledning

Mounting of the Combi Folding Top

RO2[®]

nothing compares!

Billed nr. 1



Billed nr. 2



Billed nr. 3



Billed nr. 4



Billed nr. 5



Billed nr. 7



Billed nr. 6



Billed nr. 8



Billed nr. 9



- A) Dismount the armrest, then mount the mounting point on the armrest, mount the armrests on the chair again.
See picture 1 and 2
- B) Mount the fitting on the headsupport, the pipe on the fitting has to be vertical when the headsupport is on the chair.
See picture 3 and 4

Mounting on the chair:

- D) Mount the folding top on the
- E) The enclosed plastic pipes are to be mounted in the casing, afterwards mount it in pipes in the top of folding and the arm rests.
See picture 6,7 and 8

At last the front is zipped up starting from the top

NB: Can only be mounted if a headsupport is mounted.



Montageanleitung

Montage des Schutzdaches

ROB®

nothing compares!

Bild nr. 1



Bild nr. 2



Bild nr. 3

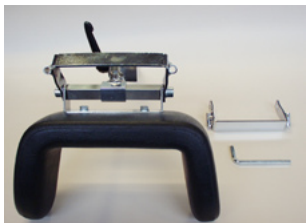


Bild nr. 4



Bild nr. 5



Bild nr. 7



Bild nr. 6



Bild nr. 8

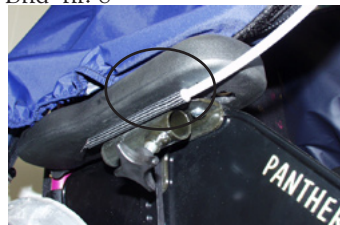


Bild nr. 9



- A) Armlehnpolster abschrauben, dann die Aufnahme an den Armlehnen anschrauben und die Armlehnen wieder am Stuhl befestigen. Siehen Bild 1 und 2
- B) Den Beschlag an der Kopfstütze anschrauben. Der Rohr des Beschlages muß vertikal sein wenn die Kopfstütze am Stuhl montiert ist. Siehe Bild 3 und 4

Befestigung am stuhl:

- C) Montieren Sie das Schutzdach
- D) Die Kunststoffrohre müssen in die Führung geschoben werden. Danach können die Rohre in Beschläge an Kopfstütze und Armlehnen gesteckt werden. Siehe Bilder 6, 7 und 8.
- E) Zuletzt den Reißverschluss an der Vorderseite von oben zuziehen

Das Schutzdach kann nur in Verbindung mit einer Kopfstütze verwendet werden.

