
Monteringsvejledning (DK)

Montering af R82 abduktionssele

Monteringsanvisning (SV)

Montera af R82 abduktionssele

Monteringsveiledning (N)

Montering av R82 abduksjonssele

Mounting instruction (GB)

How to mount the R82 Abduction belt

Montageanweisungen (D)

Montage des R82 Abduktionsgurts

Montage-instructies (NL)

Monteren van de R82 Abductie-zitbroek

Instruction de montage (F)




Comment monter la sangle d'abduction R82

Monteringsvejledning

R82®


Montering af R82 Abduktionssele


Anbefalet til: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

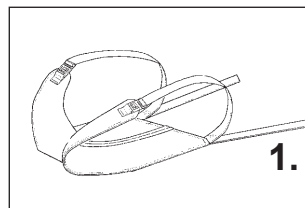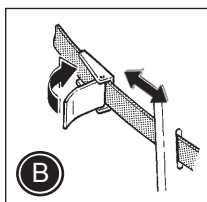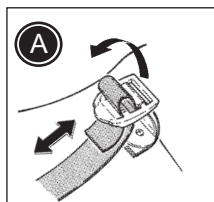


Brug beslaget (A) på stolen for at montere abduktionsselen. Hvis der ikke er monteret beslag, brug da de vedlagte fix locks og selebeslag (B) for at montere abduktionsselen som vist på tegningen. Hvis der er tvivl om monteringen, kontakt da en lokal terapeut eller autoriseret R82 personel.

- * Montér de nederste seler (1) bagerst i sædet.
- * Montér de øvrige seler forrest på selen.

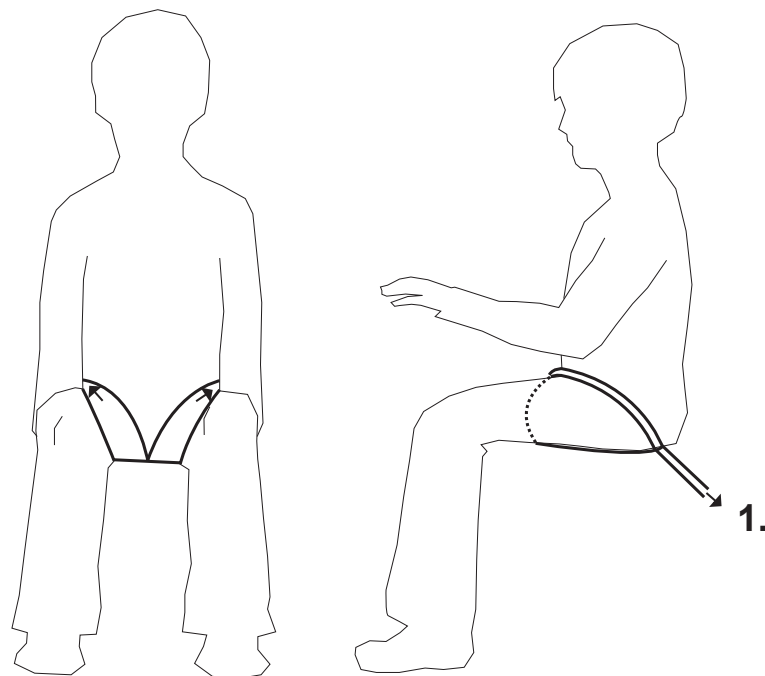


 Sørg for altid at stramme alle seler for at sikre optimal sikkerhed, støtte og komfort. Abduktionsselen sidder rigtigt, når der kan holdes 2 fingre mellem selen og barnets krop. Tjek dette før brug.

 Efterlad aldrig brugeren i produktet uden opsyn. Kontroller jævnligt at alle seler er korrekt placeret samt alle justeringer forsvarligt udført. Forkerte instillinger kan medføre alvorlig skade. Tjek før brug.

 Alle spænder på veste og seler skal jævnligt kontrolleres og rengøres. Spænderne skal altid holdes fri for skidt.

 Læs omhyggeligt vaskeanvisningen på selen for at vedligeholde og vaske abduktionsselen korrekt.

 Opdaterede betjeningsvejledninger kan altid findes på: R82.dk







Producer
R82 A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved

Monteringsanvisning

R82®


Montera R82 Abduktionssele


Rekommenderas för: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

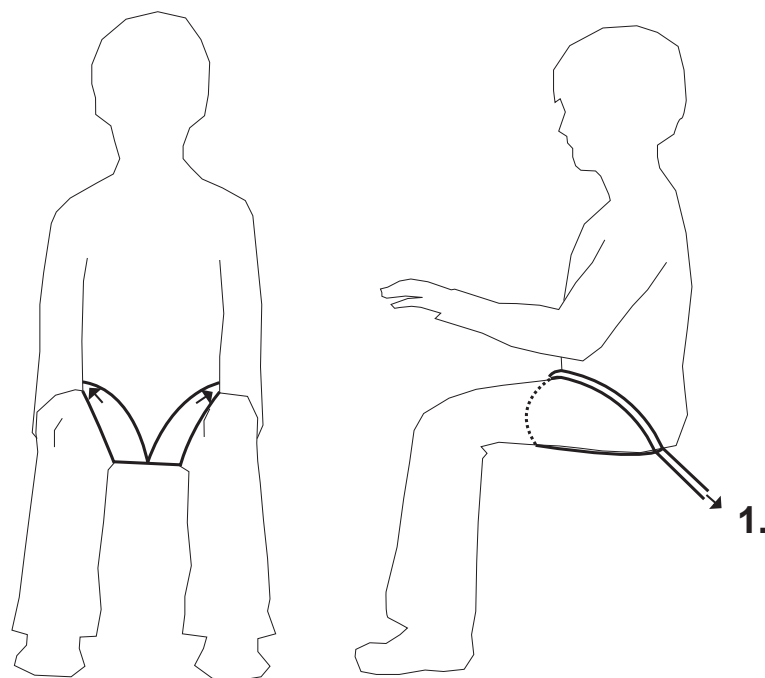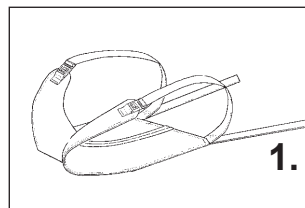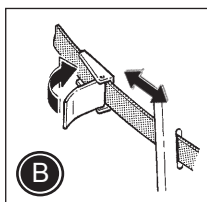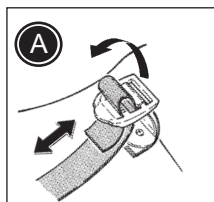



Använd beslagen (A) på stolen när du monterar abduktionssele. Om det inte finns monterade beslag bör du använda bifogade fixlock och bältesbeslag (B) och montera abduktionssele som visas på bilden. Kontakta din återförsäljare vid minsta tvekan om hur produkten ska monteras.


- * Montera alltid axelremmarna (1) lite högre än brukarens axelhöjd.
- * Montera de nedre remmarna (2) i ungefär 45° i sitsens ryggstöd.

 Dra åt alla remmar ordentligt för att uppnå optimal säkerhet, stöd och bekvämlighet. Abduktionssele är korrekt monterad när du kan få in två fingrar mellan sele och barnets kropp. Kontrollera detta före varje användning.

 Lämna aldrig brukaren utan uppsikt. Ständig övervakning av en vuxen person krävs. Se till att alla fästen och tillbehör har placerats och monterats korrekt. Felaktig montering kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera detta före varje användning.

 Alla spännen måste ses över och rengöras regelbundet. Håll dem alltid rena för att bibehålla optimal säkerhet

 Läs noga anvisningarna på etiketten om hur abduktionssele ska skötas och tvättas.

 Den senaste versionen av monteringsanvisningen finns tillgänglig online: R82.com







Producer
R82 A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved

Monteringsveiledning

R82®


Montering av R82 abduksjonssele


Anbefalt til: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

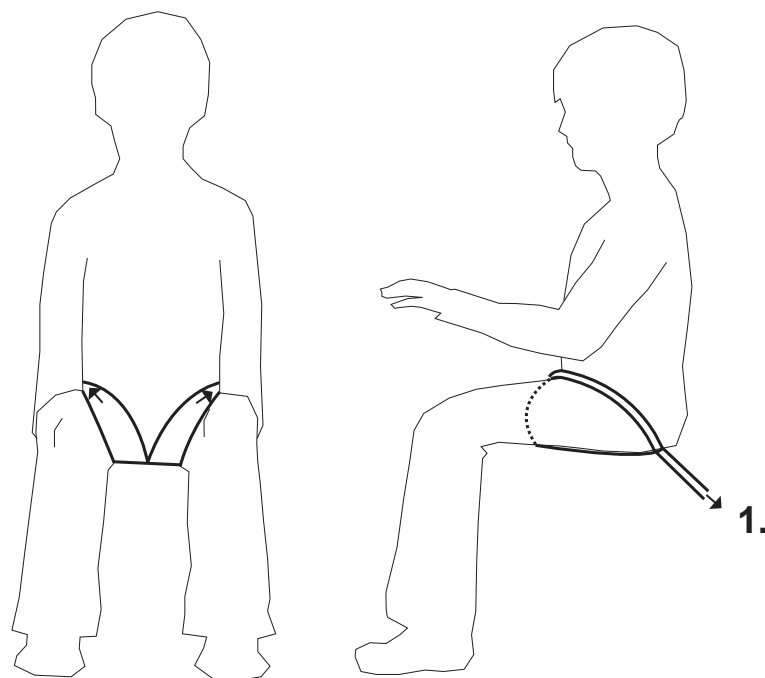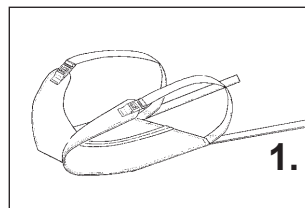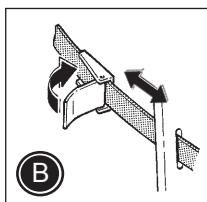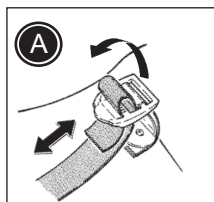



Bruk beslag (A) på stolen til å montere abduksjonssele. Hvis det ikke er montert beslag, bruk da de vedlagte fix-locks og selebeslag (B) for å montere abduksjonssele som vist på tegningen. Hvis det er tvil om monteringen, kontakt en lokal terapeut eller R82 forhandleren.

- Monter de nederste selene (1) bakerst på setet.
- Monter øvrige seler i forkant av setet.

 Sørg for å stramme alle selene for å sikre optimal sikkerhet, støtte og komfort. Abduksjonssele er passe strammet når man kan holde 2 fingre mellom selet og barnets kropp. Sjekkes før bruk.

 Etterlat aldri brukeren i produktet uten tilsyn. Kontroller jevnlig at alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er forsvarlig utført. Feilinnstillinger kan medføre alvorlig skade. Sjekkes før bruk.

 Alle spenner skal kontrolleres og tørkes av jevnlig med fuktig klut. For optimal sikkerhet påse at spennene alltid er rene.

 Les abduksjonsseles vaskeanvisning for å vedlikeholde og vaske den korrekt.

 Siste versjon av bruksanvisningen finnes på R82.com







Producer
R82 A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved

Mounting instruction




How to mount the R82 Abduction belt


Recommended for: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

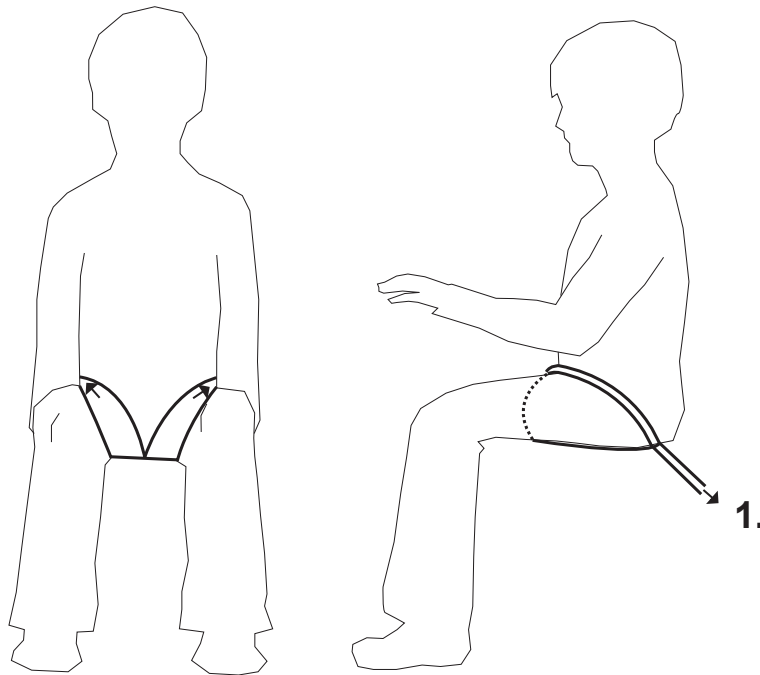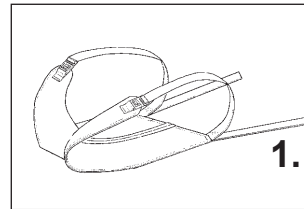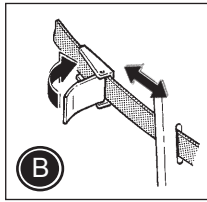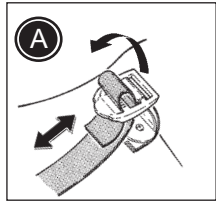



Use the fittings (A) on the chair to mount the abduction belt. If no fittings are mounted, please use the enclosed fix locks and belt fittings (B) to mount the abduction belt as shown on picture. Any doubt on mounting, please contact a local therapist or authorized R82 personnel.


- * Mount the lower straps (1) in the back of the seat.
- * The other straps is mounted at the front of the belt.

 Always tighten all straps securely to obtain optimal safety, support and comfort. The abduction belt is fitted correctly when two fingers can be put between the harness and the child's body. Check before every use.

 Never leave the user unattended. Ensure permanent supervision by an adult. Take care that all fixations and adjustments are placed and fitted correctly. Incorrect fitting may cause serious injury. Check before every use.

 All buckles must be checked and cleaned on a regular basis. To obtain optimal safety, always keep the buckles cleaned.

 Carefully read the care label on the harness to maintain and wash the abduction belt correctly.



 The latest version of the mounting instruction is always available online: R82.com

Montageanweisungen

R82®


Montage des R82 Abduktionsgurts


Empfohlen für: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

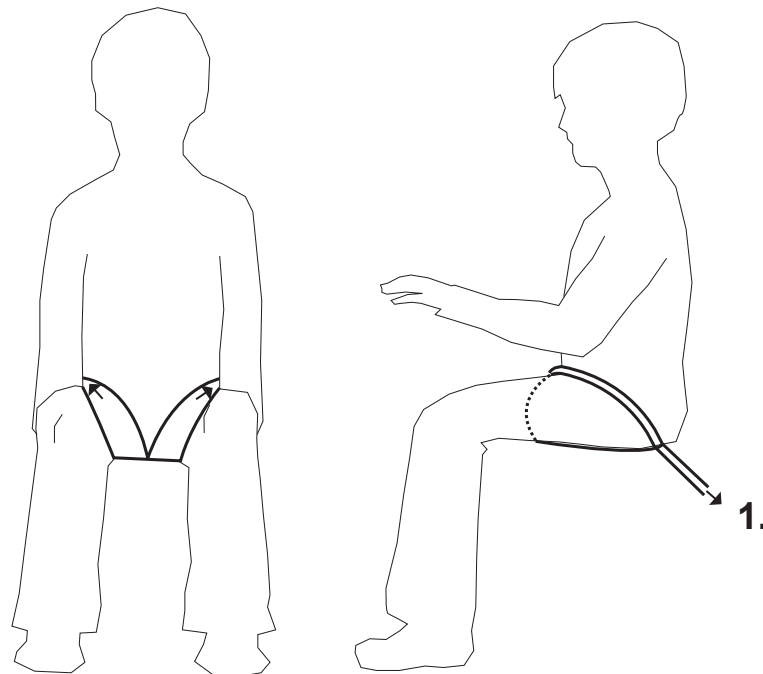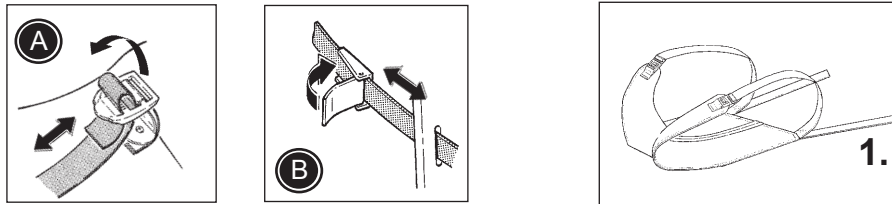


Benutzen Sie die Beschläge (A) und (B) an dem Stuhl, um den Abduktionsgurt zu befestigen. Falls keine Beschläge montiert sind, dann müssen die mitgelieferten Sicherungsverschlüsse und Gurtbeschläge (B) benutzt werden, um den Abduktionsgurt gemäß den Abbildungen zu befestigen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit einem lokalen Therapeuten oder autorisiertem R82-Personal auf, falls Sie Zweifel über eine korrekte Montage haben.


- * Montieren Sie die unteren Gurte (1) ungefähr hinter dem Stuhl Rücken.
- * Die anderen Gurte werden an der Vorderseite des Gurts befestigt.

 Für optimale Sicherheit, Unterstützung und Komfort müssen alle Gurte immer sicher angezogen werden. Der Abduktionsgurt ist korrekt montiert, wenn genügend Platz für zwei Finger zwischen dem Gurt und dem Körper der Person vorhanden ist. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie eine permanente Überwachung durch eine erwachsene Person sicher. Stellen Sie sicher dass alle Befestigungen korrekt montiert und eingestellt sind. Falsch montierte Beschläge können zu schweren Verletzungen führen. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Alle Schnallen sind häufig zu überprüfen und reinigen. Um optimale Sicherheit zu erreichen, dafür sorgen, dass die Schnallen immer gereinigt sind.

 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Pflegeetikett durch, für eine korrekte Reinigung und Wartung des Abduktionsgurts.





 Die aktuellste Version der Montageanweisungen ist immer Online verfügbar: R82.de

Montage-instructies

R82®


Monteren van de R82 Abductie-zitbroek


Aanbevolen voor: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

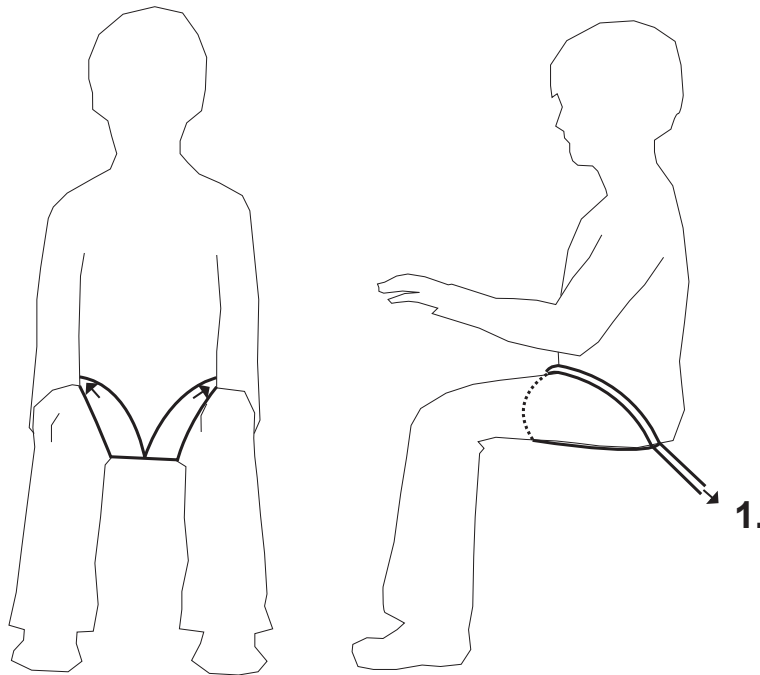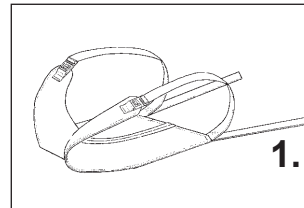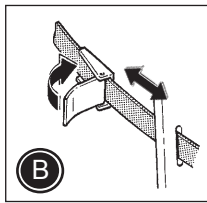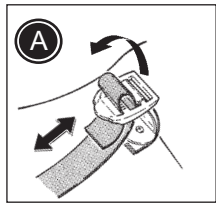



Gebruik de bevestigingen (A) op de stoel voor het monteren van de abductie-zitbroek. Als deze bevestigingen niet aanwezig zijn, gebruik dan de meegeleverde klagespen en gordelbevestigingen (B) voor het monteren van de abductie-zitbroek. (zie afbeelding). Neem bij twijfel over de montage contact op met de dealer of met een medewerker van R82.

- * Monteer de onderste banden (1) in de achterzijde van de zitting.
- * De andere banden worden aan de voorzijde van de zitbroek vastgeklikt.

 Trek alle banden altijd stevig aan ten behoeve van optimale veiligheid, ondersteuning en comfort. De gordel of fixatie is correct aangebracht wanneer men twee vingers tussen het gordelsysteem en het lichaam van het kind kan doen. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.

 Laat het kind nooit onbegeleid achter. Zorg voor permanent toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat alle fixaties en verstellingen goed zijn aangebracht en goed vastzitten. Verkeerd aanbrengen kan tot ernstig letsel bij het kind leiden. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.

 De sluitingen moeten regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd worden. Om een optimale veiligheid te garanderen, zorg dat de sluitingen goed schoon blijven.

 Lees het etiket op het gordelsysteem voor het correct onderhouden en wassen van de gordel of fixatie.




 De laatste versie van de montage-instructies staat altijd op de website: R82.nl

Instruction de montage

R82®


Comment monter la sangle d'abduction R82


Recommandé pour: x:panda, Panda Futura, Panther, Tiger 2000, Serval, Wombat, Cougar, Winther Reha

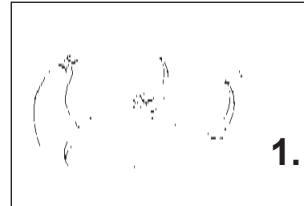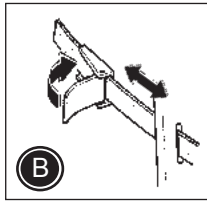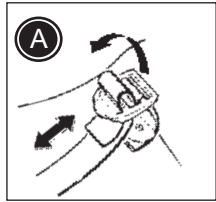



Utiliser les fixations (A) du siège pour monter la sangle d'abduction. S'il n'a pas de fixations sur le siège, utiliser alors les boucles de fixation jointes à la ceinture pour le montage comme indiqué en schéma (B). En cas de doute lors du montage, contacter votre revendeur ou un thérapeute patenté.

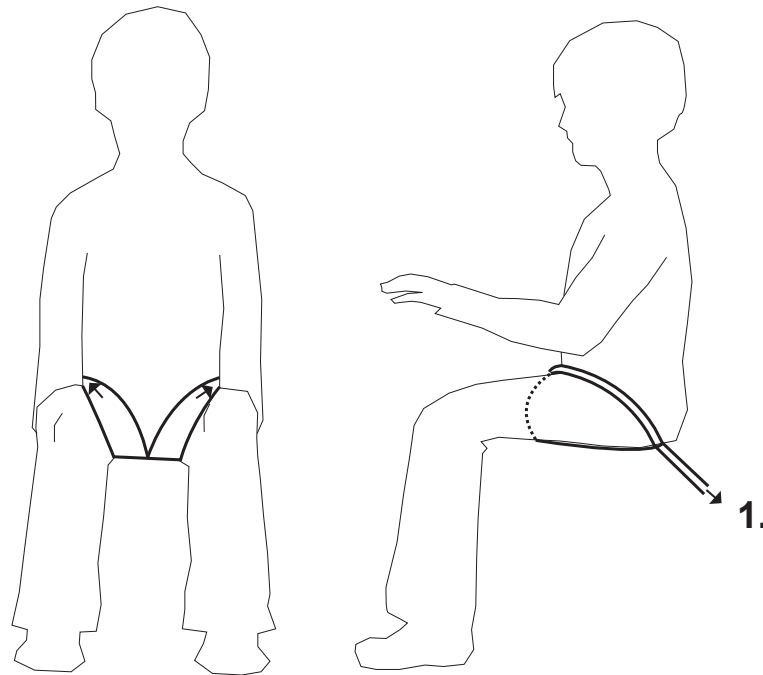- * Monter les sangles inférieures (1) au dossier du siège.
- * L'autre sangle est fixée à l'avant de la ceinture.



 Toujours serrer fermement toutes les sangles pour obtenir un maintien ayant le maximum de sécurité et de confort. La sangle d'abduction est installée correctement quand il y a la place de 2 doigts entre le harnais et le corps de l'enfant. A vérifier avant chaque utilisation.

 Ne jamais laisser un utilisateur sans surveillance. Une supervision permanente doit être assurée par un adulte. Veiller à ce que toutes les fixations et réglages soient placés et fixés correctement. Une fixation incorrecte peut entraîner des blessures. Vérifier avant chaque utilisation.

 Lire soigneusement l'étiquette d'instructions se trouvant sur le harnais pour entretenir et nettoyer correctement le harnais.

 La dernière version des instructions de montage peut aussi être trouvée sur le site Web www.r82.com