


Bischoff & Bischoff


návod k použití

TSE-A / O



Enjoy mobility.

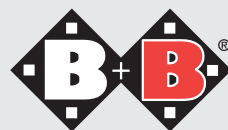

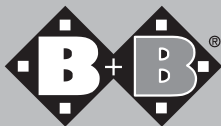

TSE-A/O

(Nástavec na WC s nastavením výšky)

Vážený zákazníku,


pořízením této toaletní pomůcky B+B získáváte špičkový německý výrobek, který se již tisícinásobně osvědčil v profesionální praxi.

Tento návod k použití Vás má lépe seznámit s obsluhou a manipulací s Vaší toaletní pomůckou B+B, a tím zvýšit bezpečnost.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem!

1. Pozor - bezpečnostní upozornění! (Analýza rizik podle DIN EN ISO 13485)

- Max. hmotnost uživatele 150 kg!
- Nosnost se nevztahuje na poklop WC sedátka. Poklop není vhodný k sezení!
- Nástavec na WC není vhodný k dlouhodobému sezení!
- Dbejte na to, aby loketní opěrky řádně zaskočily!
- Při sklápění loketních opěrek dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí části těla ani oděvu.
- Dbejte na to, aby šrouby zádové opěrky pevně seděly!
- Přední i zadní přestavení výšky nastavte vždy na stejnou výšku!

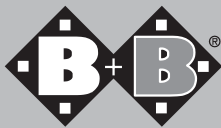

1. Montáž loketních opěrek (pouze u TSE-A)

Loketní opěrky zasuněte do připraveného otvoru v zadní části tělesa nástavce na WC.

Palcem při tom stlačte pružinové tlačítko a držte jej tak dlouho, dokud pružinové tlačítko neprochází otvorem.

Dříve než spustíte loketní opěry se ujistěte, že nedošlo k přiskřípnutí částí těla ani oděvů. Zároveň je nutné dbát na to, aby loketní opěrky, než se opřete, pevně zaskočily.

2. Nastavení výšky sedáku

Nástavec na WC lze nastavit na 3 výšky (8, 12 a 16 cm).

Pro nastavení výšky sedáku odšroubujte oba rýhované šrouby na zadním dílu TSE.

- Uvolněte plastovou čepičku v poloze, kterou požadujete.
- Hliníkovou tyč zvedněte do požadované polohy a opět našroubujte šroub s rýhovanou hlavou.
- Zbývající plastové čepičky zatlačte do otevřených otvorů.
- U přední části TSE postupujte přesně tak, jak je popsáno výše.

Dbejte na to, aby byla zadní i přední hliníková tyč nastavena na stejnou výšku.

3. Montáž nástavce na WC


- Odšroubujte poklop toalety na svém záchodě.
- Odšroubujte obě dlouhé plastové matice na zadní hliníkové tyči. Oba šroubové závity zasuňte do otvorů ve Vaší toaletě.
- Nyní obě dlouhé plastové matice našroubujte zdola na šroubové závity.

Podle velikosti záchodové mísy je nutné namontovat zadní hliníkovou nosnou tyč s upevňovacími šrouby přetočenými o 180°, aby se zamezilo sesmeknutí přední dosedací trubky ze záchodové mísy (viz fotografie vpravo).


Dbejte na to, aby byly matice pevně utaženy, aby nástavec TSE na toaletě pevně seděl.




Minimální montážní vzdálenost mezi záchodem a stěnou je 18 cm.

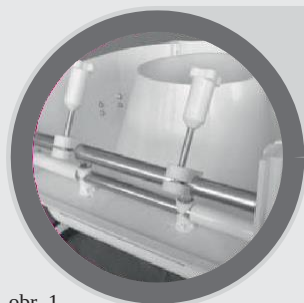

obr. 1

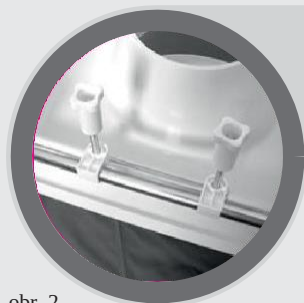

obr. 2

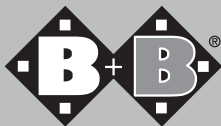

4. Loketní opěrky (pouze u TSE-A)

Loketní opěrky jsou odklápěcí. Mírným tlakem na loketní dílec ve spuštěné poloze lze loketní opěrky přimět k tomu, aby zaskočily (zvuk zaklapnutí).

Při přesedání z vozíku musí být loketní opěrka odklopena dozadu.

Dodržujte pokyny uvedené v bodě 1 (Montáž loketních opěrek).

5. Péče a údržba

Nástavec na WC je třeba čistit běžnými čisticími, resp. dezinfekčními prostředky. Nepoužívejte ostré nebo žíravé čisticí prostředky. Nástavec na WC je bezúdržbový.

6. Technické údaje

Hloubka:	49 cm
Šířka:	58 cm
Výška:	37 cm
Výška loketní opěrky (od sedátka):	21 cm
Šířka sedáku:	40 cm
Hloubka sedáku:	40 cm
Hmotnost TSE-A:	6,3 kg
Hmotnost TSE-O:	4,4 kg
Max. nosnost:	150 kg

Záruční list

(Dodržujte naše všeobecné obchodní podmínky)

Typ: TSE-A/O

Sériové číslo:*

(vyplní specializovaný obchod)

Specializovaný prodejce:

Datum a razítko

*Informační štítky se nachází na bočním rámu

REHA 2015, s.r.o. | Bohunická 52
619 00 Brno | Czech Republic
info@reha2015.cz
www.reha2015.cz

REHA 2015
HELPING THE NEEDY

oficiální distribuce a autorizovaný servis Bischoff & Bischoff pro ČR

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 72 48 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

